


F&P Brevida™

NENÄTYYNYMASKI

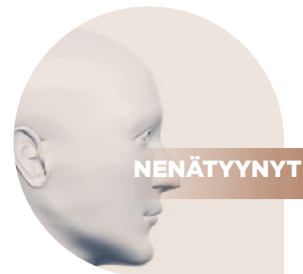

Suunniteltu luotettavaksi. Tehty mukavaksi.

UUSI

Potilaan luottamuksen voittaminen on avain onnistuneeseen CPAP-hoitoon, ja potilasluottamus alkaa maskista, joka istuu hyvin ja on mukava.





Brevida™

Tärkeimmät ominaisuudet ja hyödyt

Säädettävä pääremmi

Säädettävä pääremmi on suunniteltu pysymään paikoillaan nukkumisen aikana.

AirPillow™-tiiviste

Innovatiivinen AirPillow™ täyttyy ilmalla ja muodostaa hellävaraisen ja tehokkaan tiiviste.



VisiBlue™

Maskin tärkeimpien osien siniset korostusmerkinnät auttavat potilaita maskin päivittäisessä käytössä.

Pestävä diffuusori

Innovatiivinen diffuusori vähentää melua ja vetoa ja on lisäksi pestävä ja kestävä.



Innovatiivinen F&P Brevida™ AirPillow™ -tiiviste

Kaksi tiivistekokoa

Erittäin pieni – pieni ja keskikokoinen–suuri.

Erittäin ohut, pehmeä tiiviste

Tiivistysalue on tehty erittäin ohuesta (0,25 mm), pehmeästä silikonista, joka tiivistää hellävaraisesti.

Monipuoliset tyynyt

Monipuolinen tyynygeometria sopii erikokoisille sieraimille.

Vakauttavat sivutuet

Sivutuet on suunniteltu vähentämään tiivisteiden paikoiltaan siirtymisen todennäköisyyttä nukkumisen aikana.




Hellävarainen, pehmeä tiiviste

AirPillow™ -tiiviste täyttyy ilmalla ja muodostaa hellävaraisen ”ilmatyynyn”, joka tiivistää nenän alueen.


F&P AirPillow™ -nenätyynytiiviste

Tiivistää nenän
alueen

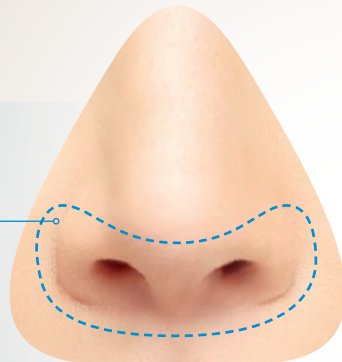

Perinteinen nenätyynytiiviste

Tiivistää sieraimet

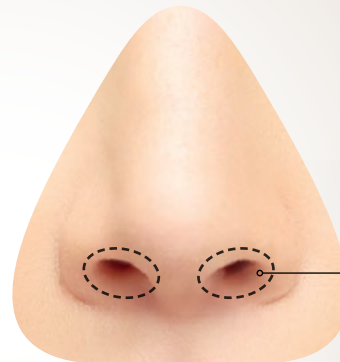

F&P Brevida™:n sovittaminen



Vaihe 1.
Pidä silikonitiivistettä etäällä nenästäsi ja levitä silikonitiivisteen pehmeät sivusiivekkeet sormillasi. Ohjaa sen jälkeen tiivisteen kaksi aukkoa sieraimiisi.



Vaihe 2.
Pidä maskin runkoa paikallaan toisella kädellä ja venytä pääremmi pääsi yli toisella kädellä. Aseta hihnat korvien yläpuolelle sovituskuvan mukaisesti.



Vaihe 3.
Kiristä tai löysää pääremmiä hihnoja varovasti pääremmiä sivuilta, kunnes maski istuu mukavasti.

POHJOIS-AMERIKAN / AASIAN JA TYYNEMEREN ALUEEN TILAUSKOODIT

MASKIT		400BRE114	Brevida-tiiviste keskikokoinen-suuri (50 kpl)
BREISA	Brevida erittäin pieni - pieni (yksi XS-S-kokoinen tiiviste)	400BRE120	Brevida-pääremmi
BREIMA	Brevida keskikokoinen-suuri (yksi M-L-kokoinen tiiviste)	400BRE151	Brevida-pääremmiklipsit (10 kpl)
BREISMA	Brevida XS-S ja M-L (kaksi tiivistettä)	400BRE161	Brevida-diffuusori (10 kpl)
		400BRE171	Brevida-kulmaliitin
VARAOSAT		400FPH241	F&P-kiertonivel 2
400BRE111	Brevida-tiiviste erittäin pieni - pieni	400BRE131	Brevida-maski nro H/G XS-S
400BRE112	Brevida-tiiviste keskikokoinen-suuri	400BRE132	Brevida-maski nro H/G M-L
400BRE113	Brevida-tiiviste erittäin pieni - pieni (50 kpl)		

EUROOPAN / AFRIKAN / ETELÄ-AMERIKAN TILAUSKOODIT

MASKIT		400BRE114	Brevida-tiiviste keskikokoinen-suuri (50 kpl)
BREISU	Brevida erittäin pieni - pieni (yksi XS-S-kokoinen tiiviste)	400BRE120	Brevida-pääremmi
BREIMU	Brevida keskikokoinen-suuri (yksi M-L-kokoinen tiiviste)	400BRE151	Brevida-pääremmiklipsit (10 kpl)
BREISMU	Brevida XS-S ja M-L (kaksi tiivistettä)	400BRE161	Brevida-diffuusori (10 kpl)
		400BRE171	Brevida-kulmaliitin
VARAOSAT		400FPH241	F&P-kiertonivel 2
400BRE111	Brevida-tiiviste erittäin pieni - pieni		
400BRE112	Brevida-tiiviste keskikokoinen-suuri		
400BRE113	Brevida-tiiviste erittäin pieni - pieni (50 kpl)		